


# SWLFSYNERGYR®



## DAS BESTE NOCH BESSER

Das RMO® SWLF (reibungsarmer Straight Wire) Synergy R® Bracket ist die jüngste Entwicklung bei reibungsarmen Systemen: wenn gewünscht ist es passiv und wenn nötig völlig kontrollierbar. Keine Clips, keine Klappen und keine Defekte. SWLF Synergy R® kombiniert einfache und leichte Anwendung selbstligierender Brackets mit Flexibilität und Spitzenleistung von Synergy-Friktonsselektionskontroll-Modi (FSC). SWLF Synergy R® bietet minimale Friktion und rasche Bogenwechsel bei Eckzahn- und Prämolaren-Brackets, die zu jedem Behandlungszeitpunkt in konventionelle Synergy®-Brackets konvertiert werden können. SWLF Synergy R® erwies sich in klinischen Tests als effizient und wurde in den USA sowohl design't, entwickelt als auch hergestellt, worauf wir stolz sind.

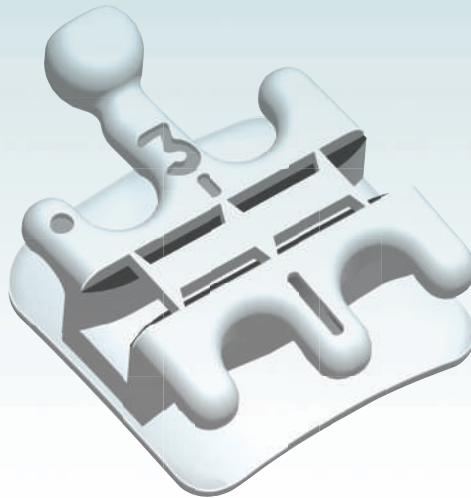


SWLF Synergy R® Brackets können mit Kappen-Konvertierzangen in klassische Synergy-Brackets konvertiert werden.

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE SIND u.a.:

- Eckzahn- und Prämolaren-Brackets mit integrierter konvertierbarer Kappe.
- Behandlungszeit kann reduziert und Intervalle vergrößert werden
- Keine beweglichen Teile- keine Clips, Kappen oder Gleitmechanismen
- Breite, trompetenförmige Einführöffnungen für weniger Knicken und Einklemmen
- Flaches Profil - angenehm für Ihren Patienten
- Jederzeit in ein Standard-Synergy® Bracket konvertierbar, um erweiterte FSC-Modi verwenden zu können
- Ausreichend starke Kappen-Konvertierungskraft
- Abgerundete und großzügige Flügelunterschnitte für einfaches Ligieren wenn konvertiert
- Permanente ID-Markierungen mit vertikaler Mittellinie für exaktes Setzen
- Metall-Spritzguss (MIM) für bessere Biokompatibilität und sanfte Kanten

# SWLF SYNERGY R®

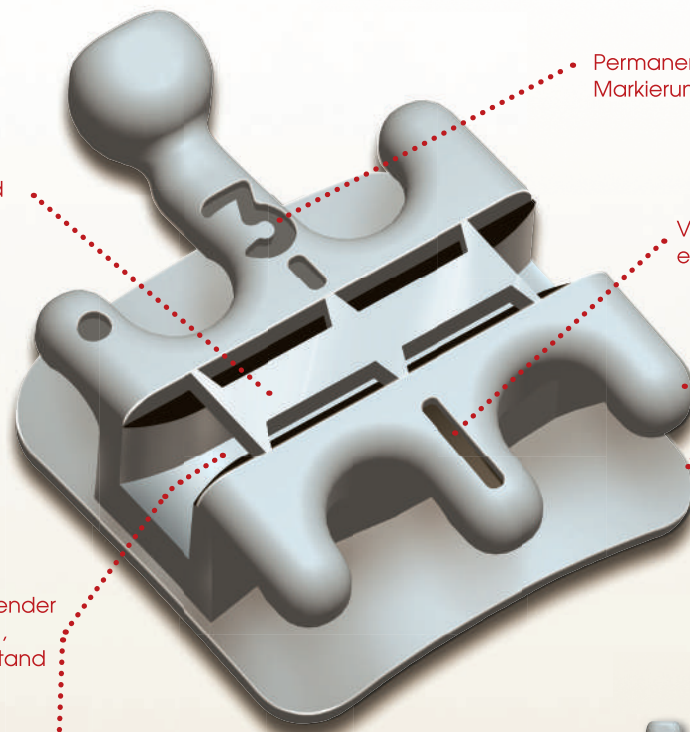

Integrierte konvertierbare Kappen für Eckzähne und Prämolaren

Permanente ID-Markierungen


Vertikale Mittellinie für exaktes Setzen

Sanft abgerundete Kanten durch MIM-Herstellungsverfahren

Einfach einzuführender Draht im passiven, nicht-ligierten Zustand


Flaches Profil - angenehm für Ihren Patienten

Netzbasis für besonders hohe und zuverlässige Haftgüte

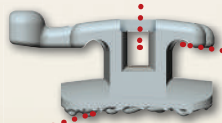

Laterale Ansicht

Abgerundete Flügelunterschnitte für einfaches Ligieren wenn konvertiert

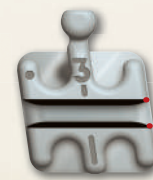

Obere Ansicht-konvertiert

Breite, trompetenförmige Einführöffnungen für weniger Knicken und Einklemmen



**FSC**  
FRICTIONSELECTIONCONTROL  
(Friktionsselektionskontrolle)

Beherrschen Sie Ihre Behandlung mit FSC. Mit dem FSC-Modus kann gemeinsam mit den integrierten und konvertierbaren SWLF Synergy R® Kappen jeder einzelne Zahn während des gesamten Behandlungsverlaufs exakt kontrolliert werden. Außerdem können Ärzte durch Ligatur der zentralen Flügel und ohne Leistungsbeeinträchtigung weiterhin den Farbwünschen eines Patienten auch bei Brackets im nicht-konvertierten Zustand nachkommen.



REIBUNGSARM



MAXIMALE ROTATION



MODERATE ROTATION



KONVENTIONELLE KONTROLLE



MAXIMALE KONTROLLE